


Kalorik

KALORISCHE PRÜFUNG FÜR MERLIN

Das Kalorik-Modul der Merlin-Software zeichnet den kalorisch ausgelösten Nystagmus auf – mit jedem Spülgerät. medicaide zeigt die Kopfstellung, markiert jeden Schlag in Echtzeit und vergleicht die Seiten nach jeder Spülung.

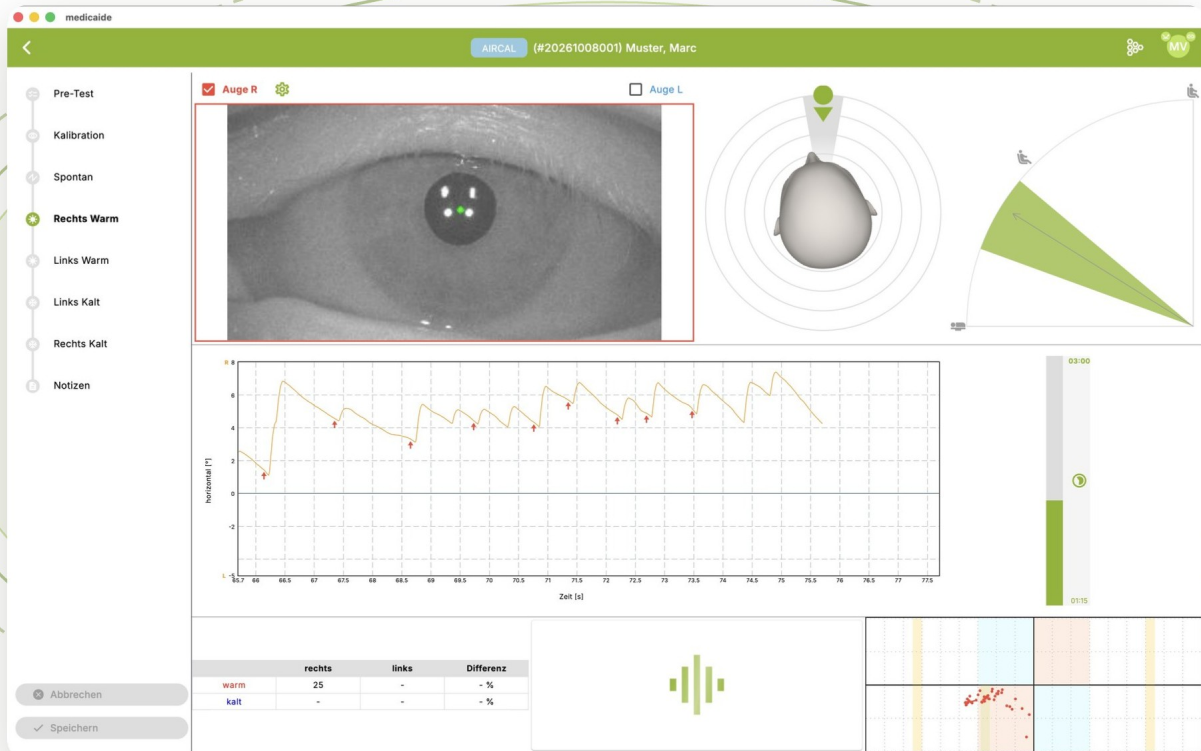

Beliebiges Spülgerät

Wasser und Luft

Optionaler Fußtaster

Praxis-EDV-Einbindung

IN ECHTZEIT

Seitenvergleich live

Nystagmusschläge in Echtzeit markiert

- Schlagzahl und GLP rechts und links
- Aktualisiert nach jeder Spülung
- Warm seitengleich: Kaltspülung entfällt

GEFÜHRT

Kopfstellung

Anzeige mit Zielbereich

- Kopfneigung live
- Grün im Zielbereich
- Nullposition per Klick

OFFEN

Jedes Spülgerät

Wasser oder Luft

- Vorhandenes Gerät
- Spülphase mit aufgezeichnet
- Ablauf einstellbar


GEFÜHRTER TESTABLAUF

Spontan > **Rechts Warm** > **Links Warm** > Kalt bei Bedarf

PLATTFORMUNABHÄNGIG · OHNE TREIBER

macOS iPadOS Windows

Kalorik im Detail

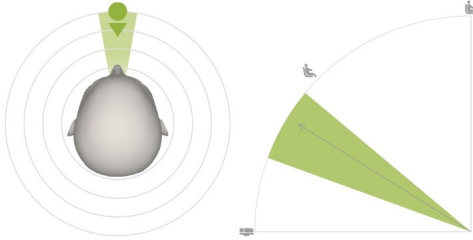


1 Kopfstellung im Zielbereich

Das Kopfneigungs-Diagramm zeigt die aktuelle Neigung und den optimalen Bereich für die Spülung. Liegt der Kopf im Zielbereich, wird dieser grün. Der Kopf-Monitor spiegelt jede Kopfbewegung wider.

Kopf-Nullposition: per Klick auf den Kopf-Monitor


Fokus & Helligkeit: automatisch per Klick auf die Pupille

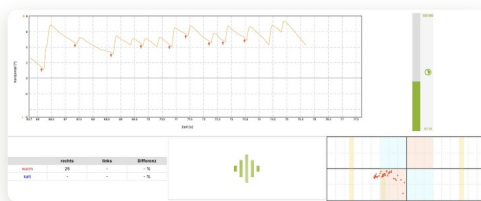

2 Nystagmus und Seitenvergleich in Echtzeit

Jeder Nystagmusschlag wird während der Aufzeichnung markiert – auch in der Spülphase, die mit aufgezeichnet wird, weil dort häufig schon Nystagmen auftreten. Nach jeder Spülung aktualisieren sich Seitenvergleich und GLP-Diagramm. Sind die Warmspülungen seitengleich, kann auf die Kaltspülungen verzichtet werden.

3 Statistische Auswertung im Ausdruck dokumentiert

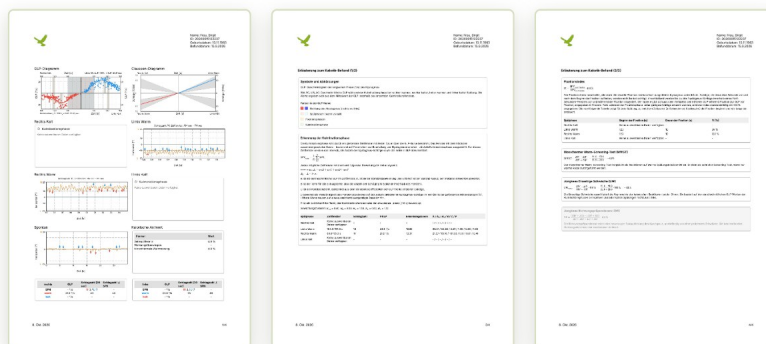

Der Befund enthält GLP- und Claussen-Diagramm, die Kulminationsphase jeder Spülung und die Verläufe aller Aufzeichnungen. Der Ausdruck erläutert, wie jeder Kennwert berechnet wurde – mit Formeln, Zeitfenstern und Teilwerten.

PDF-Export: direkt aus der Befundakte

Rohdaten: in der medicaide Befundakte

Kulminationsphase

automatisch erkannt, mit Schlagzahl und $\emptyset$ GLP

Fixationsindex

GLP während zu vor Fixation, je Spülung

Monothermer Warm-Screening-Test

Seitenvergleich der Warmspülungen

Jongkees-Formeln

Seitendifferenz und Richtungsüberwiegen

Fußtaster: Start direkt am Patienten

Mit dem optionalen kabellosen Fußtaster starten Sie die Aufzeichnung, während Sie beim Patienten stehen und spülen.

Ablauf: passend zu Ihrer Praxis

Vorlaufzeit bis zum Aufzeichnungsbeginn, Spül- und Aufzeichnungsdauer und Ruhepause sind einstellbar – Zeit genug, den Spülhandgriff ins Ohr zu bringen.

KONTAKT

Zeisberg GmbH
Gutenbergstraße 39
72555 Metzingen

Telefon +49 7123 976 975 0
info@zeisberg.net

www.zeisberg.net/merlin
www.zeisberg.net/medicaide